

Alma
For You. For Life.



Alma PrimeX
For All of You

פלטפורמת הפרימיום לטיפול פנים וגוף



חוויה ברמה אחרת

פלטפורמת הפרמיום Alma PrimeX™ תוכננה ונבנתה תוך התמקדות בצרכי המטפלים והמטופלים. בכל מרכיב ותכונה הושקעו מחשבה ותכנון קפדניים והפלטפורמה מכילה מספר רב של פטנטים ייחודיים המבטיחים תוצאות יוצאות דופן לצד חווית טיפול נוחה ופרקטית.

פלטפורמת הפרמיום המתקדמת מיועדת למגוון טיפולי פנים וגוף ומשלבת טכנולוגיות אולטרסאונד (US) וטכנולוגיות גלי רדיו (RF) אשר פועלות באופן עצמאי ובסינרגיה, על מנת להשיג את התוצאות הטובות ביותר, במיצוק והצרת היקפים בגוף (ע"י הרס תאי השומן ויצירת קולגן חדש), חידוש והצרת העור, טיפול בצלקות והתוויות נוספות.

השילוב בפלטפורמת ה-Alma PrimeX™ והיכולת לטפל במספר רב של התוויות, תאפשר לך להגדיל משמעותית את הרווחיות של הקליניקה שלך ולעמוד בקו אחד לצד הקליניקות המובילות בארץ ובעולם תוך השגת תוצאות פורצות דרך.

פלטפורמה אחת 6 ידיות לטיפול במגוון התוויות

מיצוק ועיצוב הפנים והגוף

פילינג, חידוש והצרת העור

הפחתת קמטים וקמטוטים

טיפול במגוון צלקות - פוסט אקנה, אטרופיות והיפר-טרופיות

סימני מתיחה

החדרת חומרים

צלוליט

הצרת היקפים



Alma PrimeX™

הטכנולוגיות

פלטפורמת Alma PrimeX™ פועלת בטכנולוגיות אולטרסאונד (US) וטכנולוגית גלי רדיו (RF) הכוללות פטנטים פורצי דרך המאפשרים טיפול איכותי ויעיל.

טכנולוגיית האולטרסאונד

הצרת היקפים, הרס תאי שומן וטיפול בצלוליט
ידיות UltraWave, SpeedSculpt



הטכנולוגיה של Alma היא היחידה המפיקה גלי אולטרסאונד משולבים הכוללים שני סוגי גלים בעת ובעונה אחת (אורכיים ורוחביים). הסינרגיה בין שני הגלים מעצימה את האפקטיביות של גלי האולטרסאונד ברקמה ומאפשרת פגיעה משמעותית, פירוק והרס תאי השומן המובילה להפחתה ניכרת בכמות תאי השומן ובעובי רקמת השומן.

אימפקט (מבוססת טכנולוגיית אולטרסאונד)

החדרת חומרים טרנסאפידרמאליים
ידית Impact

טכנולוגיית אולטרסאונד הפועלת במנגנון לחץ אקוסטי המייצר אפקט דחיסה. ידית האימפקט מאפשרת החדרת חומרים פעילים לעומק הרקמה לאחר טיפולים אבלטיביים ולא אבלטיבים. ידית האימפקט מייצרת מיקרו ויברציות של מולקולות החומר וכך מגבירה את החדירות של החומר ופיזורו ברקמת העור.

טכנולוגיית גלי הרדיו

הצרת היקפים, טיפול בצלוליט ומיצוק
ידיות UniLarge, UniBody

RF

טכנולוגיית גלי הרדיו הייחודית של Alma פועלת בתצורת תשדורת UniPolar והינה היחידה שחודרת לעומק רקמת ההיפודרמיס ולכן הינה הטכנולוגיה האפקטיבית ביותר לטיפול בהצרת היקפים וצלוליט.

החימום ההומוגני בשכבת הדרמיס מעודד היווצרות של קולגן חדש לקבלת תוצאות מיצוק והידוק העור בפנים ובגוף.

טכנולוגיית ה-UniPolar פועלת בתדר 40.86 MHz מאפשרת חימום מהיר ומקצרת את זמן הטיפול לצד השליטה בעומק הטיפול, טיפול מדויק בשכבת הדרמיס למיצוק העור או בהיפודרמיס להצרת היקפים וצלוליט על פי הפרמטרים הפיזיולוגיים האינדיבידואליים של המטופל.

מיקרופלזמה (מבוססת טכנולוגיית גלי רדיו)

פילינג, חידוש והצרת העור, הפחתת קמטים וקמטוטים, טיפול בצלקות וטיפול בסימני מתיחה
ידית MicroPlasma

טכנולוגיה פורצת דרך ואפקטיבית במיוחד הפועלת באמצעות גלי רדיו ומייצרת מיקרופלזמה חשמלית. האפקט הנוצר הינו כפול, אפקט אבלטיבי ואפקט תרמי.

הטכנולוגיה פועלת באופן פרקציונלי (מקטעי), ויוצרת פציעה מיקרוסקופית בצורת תעלות דקיקות בתוך העור, כל נקודת פציעה מוקפת בעור בריא, המזרז את תהליך הריפוי. ניתן לטפל בכל גווני העור.

Alma PrimeX™

הידיות

פנים

UniLarge

מיצוק והידוק העור

טכנולוגיית UniPolar למיצוק עור הפנים ואזורים קטנים בגוף. בעלת טכנולוגיית שליטה בעומק החימום בעור, המאפשרת חימום ב-4 עומקים שונים של הרקמה, בכדי להתאים את הטיפול למאפייני הרקמה של כל מטופל ובכל אזור. החימום ההומוגני משפעל את הפיברובלסטים לייצור קולגן ובכך מייצר אפקט מיצוק מידי לצד שיפור בקמטים וקמטוטים בטווח הארוך. הידית, בעלת הראש הקטן, מתאימה לטיפול באזורים קטנים כגון: סנטר, עורף, זרועות, קו חזיה ועוד.



Speed Sculpt

הצרת היקפים באזורים קטנים

טכנולוגיית אולטרסאונד מתקדמת המשלבת סינרגיה בין שני סוגי גלי אולטרסאונד להצרת היקפים והפחתת נפח רקמת השומן באזורי טיפול קטנים כגון: סנטר, עורף, זרועות, קו חזיה ועוד. הסינרגיה בין שני סוגי הגלים, האורכי והרוחבי, מעניקים אפקט עוצמתי יותר ומאפשרים הפחתה משמעותית במצבורי השומן באזורי הטיפול.



Micoplasma

פילינג, חידוש והצרת העור, הפחתת קמטים וקמטוטים, טיפול בצלקות, טיפול בסימני מתיחה, עפעפיים עליונים וקמטי הברקוד מסביב לפה

טכנולוגיית פלזמה ייחודית המבוססת גלי רדיו מעניקה טיפול אפקטיבי במיוחד המשלב אפקט אבלטיבי ואפקט תרמי באותו טיפול. הטכנולוגיה פועלת באופן פרקציונלי (מקטעי), ויוצרת פציעה מיקרוסקופית בצורת תעלות דקיקות בתוך העור, כל נקודת פציעה מוקפת בעור בריא, המזרז את תהליך הריפוי ולהקטנת הסיכוי ליצירת PIH. תהליך זה תורם להאצת הבנייה של סיבי קולגן חדשים ובתוך כך לטשטוש והעלמת צלקות, סימני מתיחה וחידוש העור. הידית כוללת 6 טיפים שונים המאפשרים לעבוד בטכניקות עבודה ועוצמות שונות כך שניתן לעבוד באופן נוח ואפקטיבי בכל אזורי הפנים והגוף באינדיקציות השונות. ניתן לטפל בכל גווני העור.



Micoplasma

Alma PrimeX™

טיפים

סוג הטיפ	סוג הטיפול	אזור הטיפול
	אטרופיק	פילינג עמוק, סימני מתיחה פנים, זרועות, בטן, ירך פנימית, ירך חיצונית, ישבן
	טראומטיק	צלקות גוף
	פילינג	פילינג שיטחי פנים, צוואר, דקולטה
	אייספיק	פוסט אקנה, אקנה פעיל פנים
	ספארק	פילינג שטחי פנים, צוואר, דקולטה, גב כף היד
	קוליברי	קמטים, צלקות פנים, גוף

Alma PrimeX™ הידיות

גוף

UltraWave

הצרת היקפים וטיפול בצלוליט

הטכנולוגיה הייחודית של Alma PrimeX™ עושה שימוש בשני סוגי גלים, אורכי ורוחבי. הגלים מועברים באופן סימולטני באמצעות ידית בעלת שטח גדול במיוחד הכולל 4 תכונות מהפכניות, המאפשרות להשיג תוצאות חסרות תקדים, בהצרת היקפים (על ידי פירוק והרס תאי השומן), טיפול בצלוליט באזורי הבטן, המותניים, הירכיים והישבן.



מביאים לכם את ה-X-פקטור

4 תכונות יוצאות דופן, שיחד מספקות את ה-X-פקטור בכל טיפול




Impulse

גלי האולטרסאונד נשלחים בפולסים, ויוצרים אפקט מכאני המחולל גלי הלם קטנים המעלים באופן ניכר את אפקטיביות פעולת הגלים ברקמה.



ConeX

הידית בצורת קונוס ייחודית, מגבירה את אפקט הגלים האקוסטיים, מקטינה את החזר גלי האולטרסאונד, מפזרת את האנרגיה בצורה שווה ובכך מעלה את אפקטיביות הטיפול.

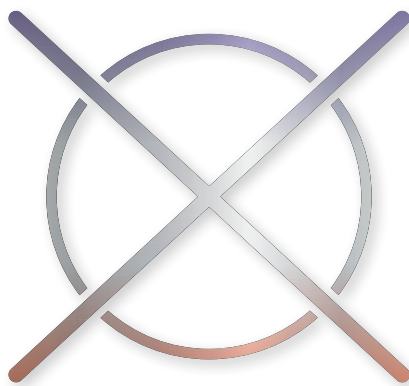

ReACCT

זיהוי מאפייני הרקמה באזור הטיפול ובקרה אוטומטית של פלט האנרגיה, מאפשרים אופטימיזציה שיטתית לשמירה על יציבות הטיפול ואחידות האנרגיה, בהתאמה למצב העור של המטופל.



MaXimize

הידית כוללת וואקום, השומר על הצמדה רציפה של הידית לעור במהלך הטיפול ומונע איבוד אנרגיה, לשיפור תוצאות הטיפול.

UniBody

מיצוק והידוק העור

ידית ה- UniBody משלבת בין טכנולוגיית RF חד-קוטבית, UniPolar, באנרגיה גבוהה לבין ראש עיסוי מסתובב, המספק פעולה מכנית.

הידית מייצרת חום מבוקר באזור הטיפול תוך עיסוי לימפתי אינטנסיבי ויעיל המגביר את חילוף החומרים בתאים וברקמת השומן ומסלק את עודפי הנוזלים והפסולת.

הידית מייצרת חימום עמוק והומוגני ב-4 עומקים שונים ברקמה על מנת להתאים את עומק הטיפול, בדרמיס למיצוק ויצירת קולגן או בהיפודרמיס, להצרת היקפים וצלוליט, לכל מטופל באופן אינדיבידואלי.



Impact

טכנולוגיית הפטנט non-focused ultrasound בתדר נמוך של Alma, פועלת במנגנון לחץ אקוסטי המייצר אפקט דחיסה, באמצעותו ניתן לעבור את המחסום האפידרמלי הטבעי של העור ובכך להחדיר חומרים פעילים לעומק הרקמה לתיקון ושיפור מראה העור.



יתרונות



טכנולוגיית מיקרופלזמה העוצמתית המבוססת על גלי רדיו, בעלת 6 טיפים



טכנולוגיית Impact חסרת תקדים המספקת פתרון משלים של החדרת חומרים פעילים לעור



תוצאות פורצות דרך אשר הוכחו קלינית



סינרגיה בין מגוון טכנולוגיות מאפשרת השגת תוצאות טובות יותר



אינו פולשני



ממשק ידידותי ומהיר לתפעול



ללא מתכלים



פלטפורמת פרמיום המציעה פתרון מקיף למגוון רחב של התוויות בפנים ובגוף



גלי US ייחודיים ואפקטיביים במיוחד בשל שילוב שני סוגי גלים המעצימים אחד את פעולת השני



פטנט יחיד מסוגו המאפשר טיפול בשכבת ההיפודרמיס להשגת תוצאות מרשימות בטיפולי פנים וגוף



התדר הגבוה ביותר (40.68 MHz פי 40 מרוב המכשירים) המאפשר חימום מהיר וקיצור זמן הטיפול



בקרת עומק ממוקדת היחידה בתחום המאפשרת לשלוט בעומק הטיפול



עוצמה גבוהה לעבודה על שטחים גדולים ולקיצור זמן הטיפול



ראש עיסוי ייעודי לטיפול גוף המסייע בתהליך הניקוז הלימפתי ומשפר את תוצאות הטיפול

דבר המומחה

"השילוב של שתי הטכנולוגיות הללו במכשיר אחד הוא גאוני - השילוב של האולטרסאונד, ה-IMPULSE להצרת היקפים יחד עם הוואקום מבטיחים תוצאה מקסימאלית עבור המטופל. המערכת באמת יעילה ובעלת תוצאות, ניכר כי הושקעה מחשבה רבה בפיתוח המוצר."



ד"ר פרננדו אורדיאלס, מנהל Institute Medical, Miramar מאלגה, ספרד





חברת Alma היא החברה היצרנית הגדולה והמובילה בעולם לטכנולוגיות רפואיות ואסתטיות מתקדמות, המשווקת במעל 90 מדינות בעולם.

Alma ישראל היא נציגתן הבלעדית של מספר חברות בינלאומיות, המובילות בתחום הטכנולוגיות הרפואיות והאסתטיות המתקדמות, בתחום הצערת עור הפנים (לייזר וחומרי מילוי), הצרת היקפים, טיפול בצלקות, שאיבה והזרקת שומן, אסתטיקה וגינלית, הסרת שיער והתוויות רבות נוספות. כל הטכנולוגיות המשווקות על ידי Alma, עומדות בתקנים המחמירים ביותר, ומאושרות על ידי משרד הבריאות. כמו כן פועלת החברה תחת תו תקן ISO 9001. כל הטכנולוגיות המשווקות על ידי Alma ישראל נחשבות כ-Gold Standard בשווקים ברחבי העולם. המערכות של החברה פותחו בהתבסס על גישה ממוקדת לקוח, הן למטפלים והן למטופלים, וכך מציבה כל פעם מחדש סטנדרט איכות לטיפולים בתחום, ברמה הגבוהה ביותר. אנו מאמינים בכוחו של הידע והמדע ומביאים זאת לידי ביטוי בהקניית הידע והניסיון המקצועי בהכשרה, בהדרכה ובליוי המטפלים בעבודה עם המערכות השונות.

חברת Alma ישראל עומדת בחוד החנית הטכנולוגית עם פטנטים ייחודיים, טכנולוגיות מתקדמות והתפתחות מתמדת, ובכך מגדירה מחדש את הענף. אנו רואים את הצלחת הלקוחות שלנו כמטרת העל שלנו כחברה, ופועלים לכך הלכה למעשה.

Alma

פרטים בטלפון: *8344 | www.alma-israel.co.il
רקפת 2, היי פארק שוהם



חפשו: alma-israel